
# Entfalten & Falten

## Entfalten

1. Korb vollständig leeren
2. Faltschalter drücken
3. Rückenlehne hochziehen, bis sie einrastet

## Falten

1. Faltschalter drücken
2. Rückenlehne nach vorne schieben

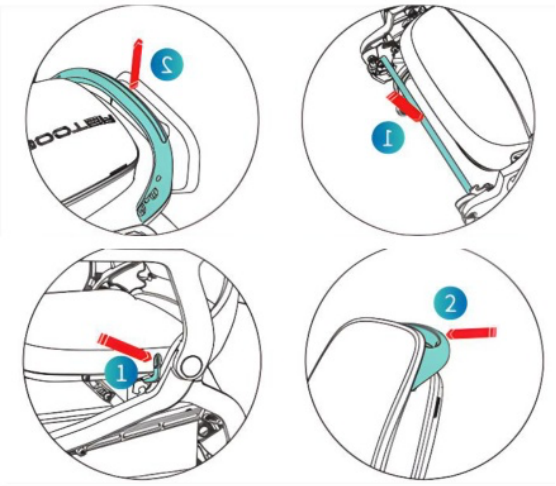

# Einschalten & Steuerung

## Ein-/Ausschalten


**Netzschalter 3 Sekunden** drücken zum Ein- oder Ausschalten

## Fahrzeugverriegelung

**Netzschalter kurz** drücken für Verriegelung ein/aus

## Funktionen

- **Gang ↑/↓:** Geschwindigkeit 1–5
- **Hupe:** Kurz drücken
- **SOS:** 3 Sekunden drücken
- **Fn:** Anfängermodus (Gang 1–2)

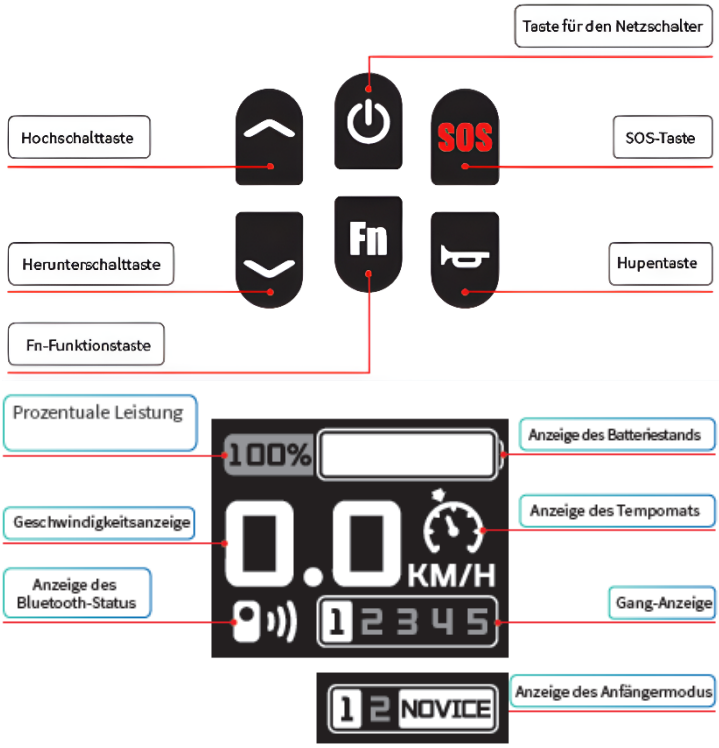



# Armlehnenlampe & USB

## Beleuchtung

**Lampe:** Via Touch-Bedienung einschaltbar

## Lademöglichkeiten


**USB-A & USB-C** zum Laden Ihrer Geräte

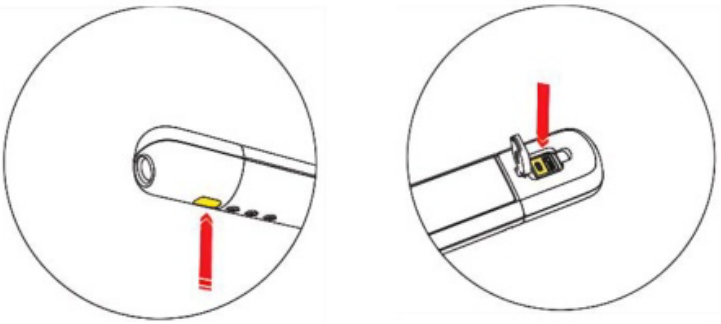



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:57 Uhr · sana.swiss

## Push-Modus

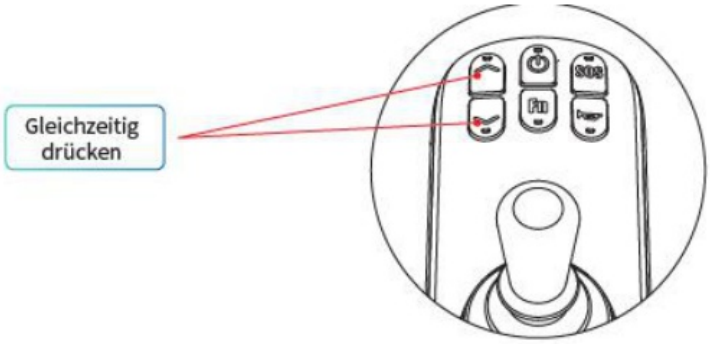


### Push-Modus aktivieren


"↑" + "↓" gleichzeitig drücken

### Push-Modus deaktivieren

**Joystick bewegen** zum Ausschalten

## Laden




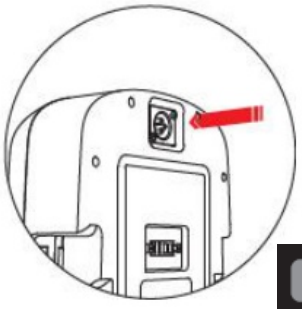

### Lademöglichkeiten

- An der Armlehne laden
- Direkt an der Batterie laden

### Ladeanzeige

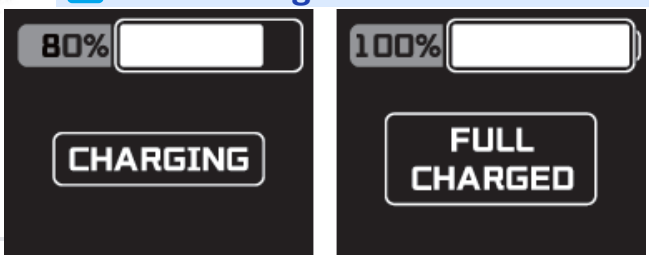



- **"CHARGING"** - Ladevorgang aktiv
- **"FULL CHARGED"** - Batterie vollständig geladen

## Im stromlosen Modus


### Bremse aktivieren

**Hebel auf beiden Seiten der Motoren anheben, um die Bremse zu aktivieren**

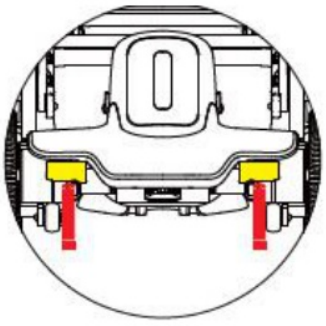

### Bremse lösen

**Hebel auf beiden Seiten der Motoren nach unten treten,** um die Bremse zu lösen

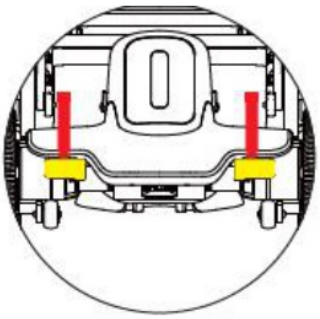

**Für Ihre Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Elektrorollstuhls.**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:57 Uhr · sana.swiss