Guide de démarrage rapide

Fauteuil roulant électrique Robooter – Application mobile

[PDF Page 1]

Scanner le code QR pour télécharger l'application mobile

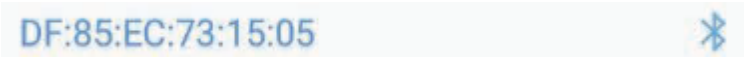
Installer l'application mobile

Cet écran s'affiche après le scan. Appuyez sur INSTALLER pour installer l'application mobile.

Connecter l'appareil

Appuyez sur RECHERCHER pour rechercher l'appareil.

Une fois cette opération terminée, l'application mobile commence à rechercher l'appareil.

Appuyez sur l'adresse Bluetooth 

affichée pour coupler l'application mobile avec l'appareil.

Connexion réussie

Cet écran indique une connexion réussie.

Appuyez sur CONFIRMER pour accéder à l'écran d'état du fauteuil roulant électrique.

Remarque :
Lorsque le fauteuil roulant électrique est en mode verrouillé, cette interface s'affiche. Après la mise en marche, le mode verrouillé s'active automatiquement. Utilisez l'application mobile uniquement après avoir déverrouillé le fauteuil roulant électrique.

- Appuyez sur 

ÉTEINDRE pour éteindre l'appareil.
- Appuyez sur 

DÉCONNECTER BLUETOOTH pour déconnecter la connexion Bluetooth.
- Appuyez sur RÉGLAGE DE VITESSE pour régler la vitesse (5 niveaux disponibles).

[PDF-Page 2]

Réglage du mode

Appuyez sur MODE NORMAL dans l'écran d'état pour basculer entre le mode amélioré et le mode normal.

Conseils d'utilisation

Il est recommandé d'activer ce mode uniquement de manière temporaire, pour se dégager d'une situation bloquée ou pour surmonter des terrains difficiles nécessitant beaucoup de puissance. Veuillez repasser en mode normal immédiatement après utilisation.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:56 Uhr · sana.swiss

Mode télécommande

Appuyez sur TÉLÉCOMMANDE dans l'écran d'état pour accéder au mode télécommande. Balayez vers le haut pour avancer, vers le bas pour reculer, vers la gauche pour tourner à gauche et vers la droite pour tourner à droite.

Paramètres

Appuyez sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour accéder aux paramètres.

Informations sur la batterie

Appuyez sur INFORMATIONS BATTERIE dans les paramètres pour afficher le niveau de charge et l'état de la batterie.

Version actuelle

Sous VERSION ACTUELLE, la version logicielle actuellement installée est affichée. Appuyez sur VÉRIFIER LES MISES À JOUR pour rechercher des mises à jour du logiciel.

Configuration système minimale requise

- Android version 6.0 ou supérieure
- iOS version 9.0 ou supérieure
- Bluetooth version 4.0 ou supérieure
- RAM minimum : 1 Go
- Espace de stockage requis : 50 Mo

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:56 Uhr · sana.swiss