
Entfalten & Falten

Entfalten

1. Korb vollständig leeren
2. Faltschalter drücken
3. Rückenlehne hochziehen, bis sie einrastet

Falten

1. Faltschalter drücken
2. Rückenlehne nach vorne schieben

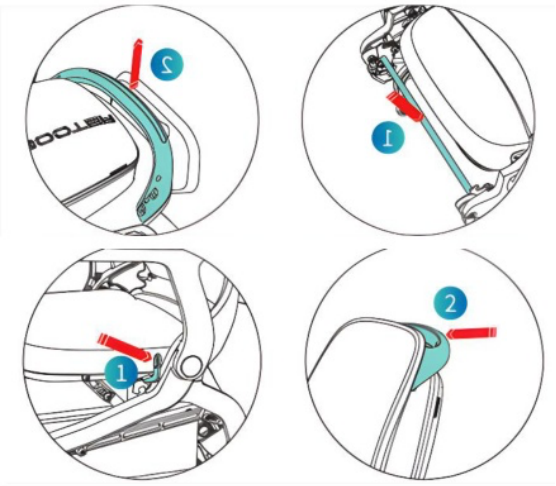

Einschalten & Steuerung

Ein-/Ausschalten


Netzschalter 3 Sekunden drücken zum Ein- oder Ausschalten

Fahrzeugverriegelung

Netzschalter kurz drücken für Verriegelung ein/aus

Funktionen

- **Gang ↑/↓:** Geschwindigkeit 1–5
- **Hupe:** Kurz drücken
- **SOS:** 3 Sekunden drücken
- **Fn:** Anfängermodus (Gang 1–2)

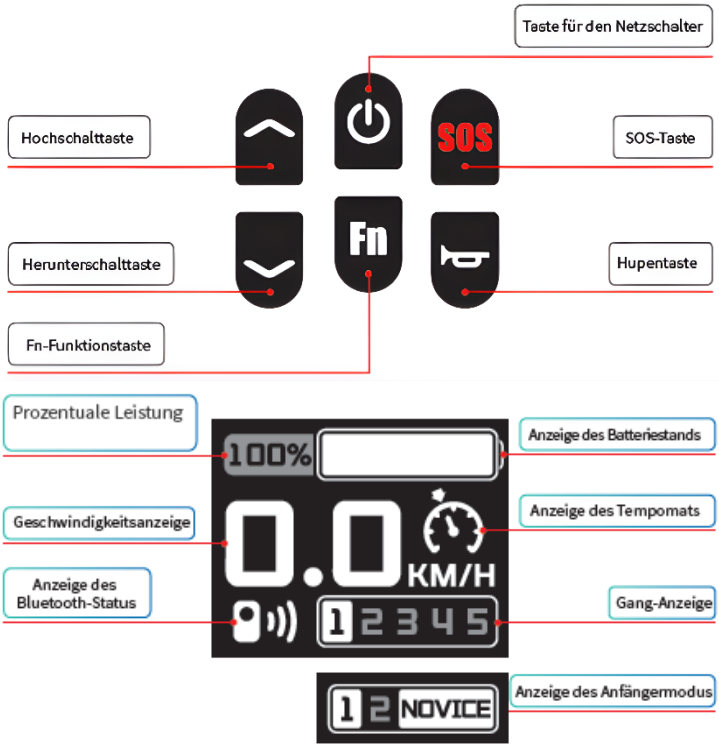


Armlehnenlampe & USB

Beleuchtung

Lampe: Via Touch-Bedienung einschaltbar


Lademöglichkeiten

USB-A & USB-C zum Laden Ihrer Geräte

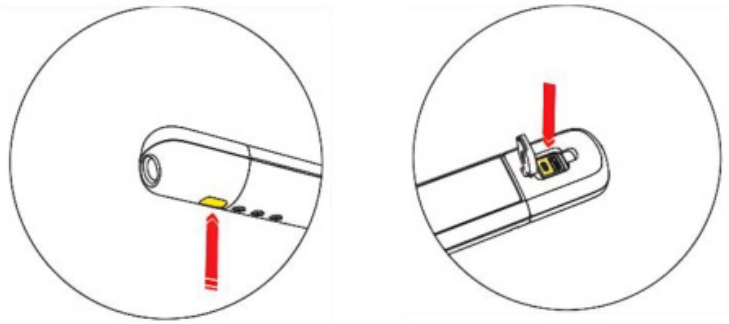

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:58 Uhr · sana.swiss

Push-Modus

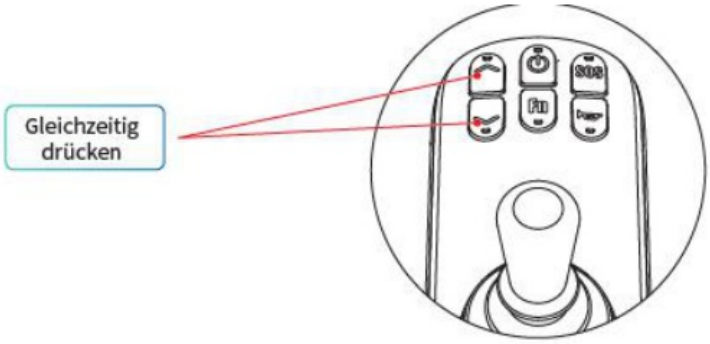

Push-Modus aktivieren


"↑" + "↓" gleichzeitig drücken

Push-Modus deaktivieren

Joystick bewegen zum Ausschalten

Laden




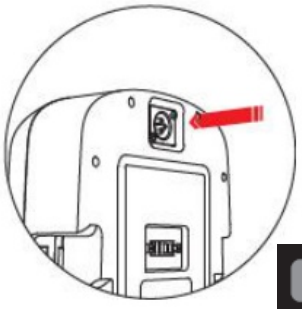


Lademöglichkeiten

- An der Armlehne laden
- Direkt an der Batterie laden

Ladeanzeige

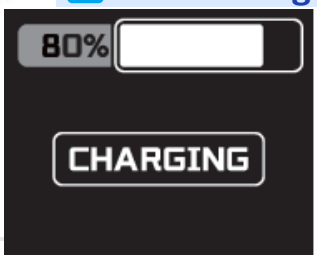

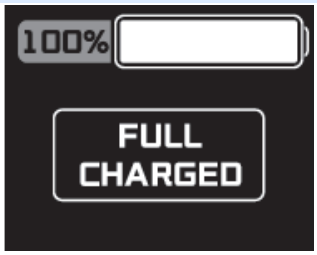


- **"CHARGING"** - Ladevorgang aktiv
- **"FULL CHARGED"** - Batterie vollständig geladen

Im stromlosen Modus


Bremse aktivieren

Hebel auf beiden Seiten der Motoren anheben, um die Bremse zu aktivieren

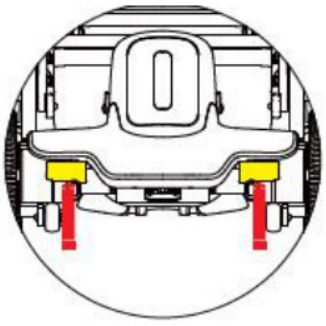

Bremse lösen

Hebel auf beiden Seiten der Motoren nach unten treten, um die Bremse zu lösen

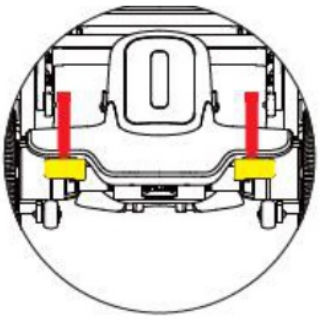

Für Ihre Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Elektrorollstuhls.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:58 Uhr · sana.swiss