


Attends® Slip Active



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Active ist geeignet für mobile aktive Personen mit starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

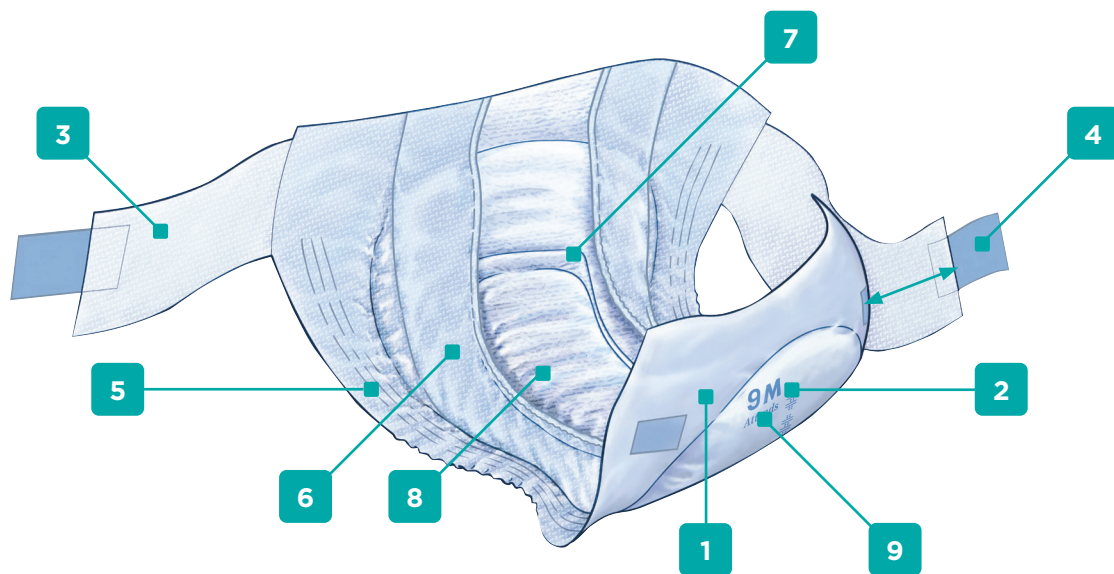

1

Weißer flüssigkeitundurchlässiger Außenschutz.

2

Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschimmeln an, wann das Produkt gewechselt werden muss.

3

Die atmungsaktiven textilartigen Seitenflügel lassen mehr Luft an die Haut. Das trägt zur Hautgesundheit bei.

4

Durch den innovativen 2-Schritt-Verschluss lässt sich der Slip Active leicht und schnell anlegen. Mit Hilfe des Klettverschlusses den Slip vorfixieren, bei Bedarf korrigieren, dann mit den breiten Klebestreifen verschließen.

5

Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.

6

Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz.

7

Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.

8

Leistungsstarker Saugkern für verbesserten Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung.

9

Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.

Weitere Informationen unter: www.attends.ch

Absorption / Größe

		Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Atmungsaktiv	Elastische Seitenbündchen	Auslaufsperrern	Wiederverschließbares Fixiersystem	Geruchsbindung (Odour Protection)	Quick-Dry Technologie
8	Attends Slip Active Medium 	28 4 x 28 24 x 4 x 28	200728 200735	75 - 110	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seiten- flügel	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4 x 28 16 x 4 x 28	201329 201336	100 - 145	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seiten- flügel	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Slip Active Medium 	28 4 x 28 24 x 4 x 28	201503 201510	75 - 110	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seiten- flügel	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4 x 28 16 x 4 x 28	201381 201398	100 - 145	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seiten- flügel	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium 	28 4 x 28 24 x 4 x 28	201404 201411	75 - 110	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seiten- flügel	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 2 x 28 36 x 2 x 28	201428 201435	100 - 145	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seiten- flügel	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten.



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Die Hautverträglichkeit von Attends Slip Active ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung.