
Déplier et plier

Déplier

1. Vider entièrement le panier
2. Appuyer sur le bouton de pliage
3. Tirer le dossier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche

Plier

1. Appuyer sur le bouton de pliage
2. Pousser le dossier vers l'avant

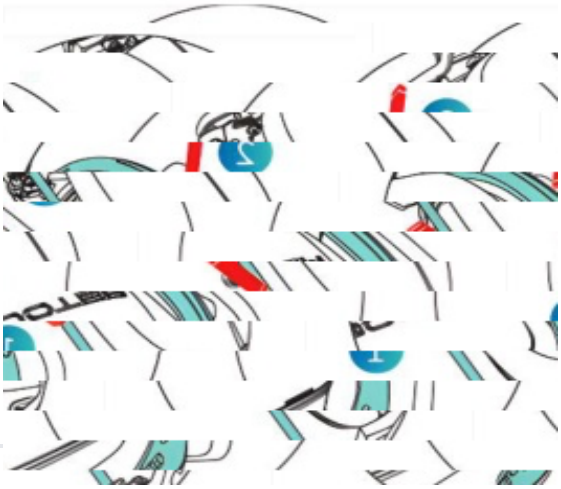

Mise en marche et commande

Marche/Arrêt


Appuyer sur l'interrupteur 3 secondes pour allumer ou éteindre


Verrouillage du véhicule

Appuyer brièvement sur l'interrupteur pour activer/désactiver le verrouillage

Fonctions

- **Vitesse ↑/↓ :** Vitesse 1 à 5
- **Klaxon :** Appuyer brièvement
- **SOS :** Appuyer 3 secondes
- **Fn :** Mode débutant (vitesse 1 à 2)

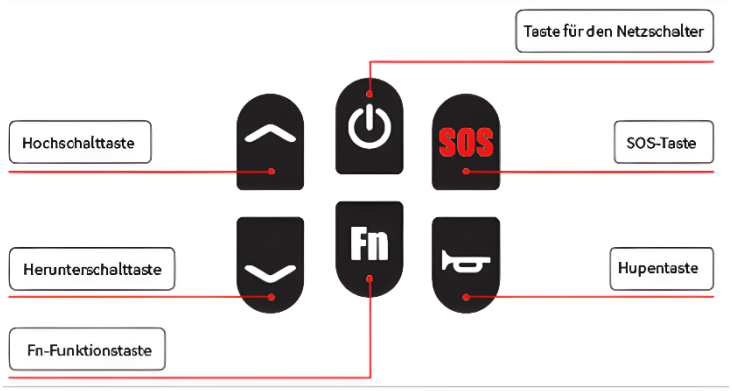

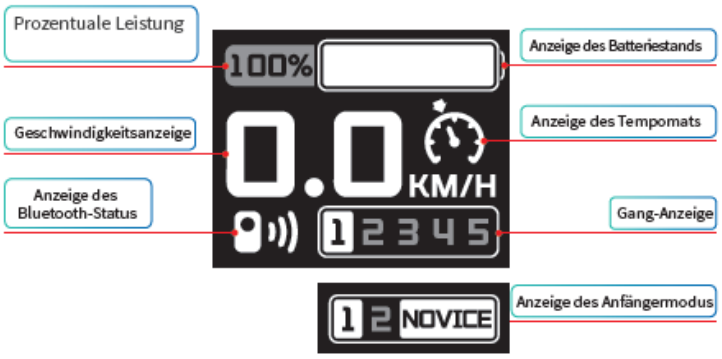


Lampe d'accoudoir et USB

Éclairage

Lampe : Activable via commande tactile


Options de charge

USB-A et USB-C pour recharger vos appareils

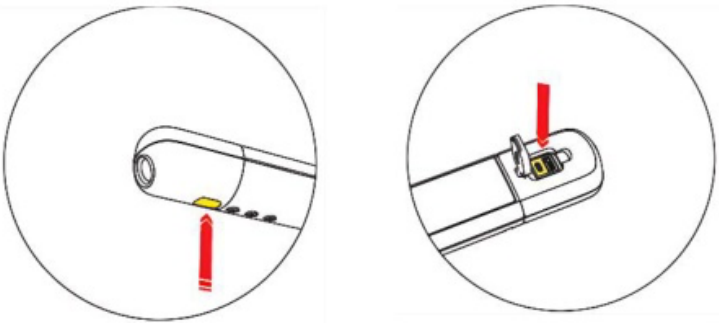

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 10:48 Uhr · sana.swiss

Mode poussette

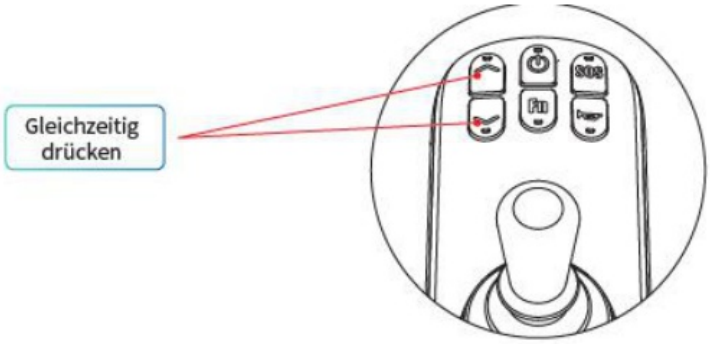

Activer le mode poussette


"↑" + "↓" appuyer simultanément

Désactiver le mode poussette

Bouger le joystick pour désactiver

Charge




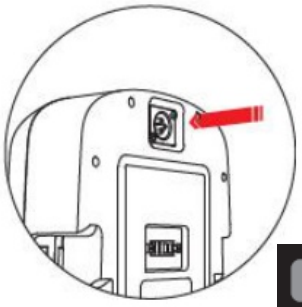

Options de charge

- Charger via l'accoudoir
- Charger directement sur la batterie

Indicateur de charge

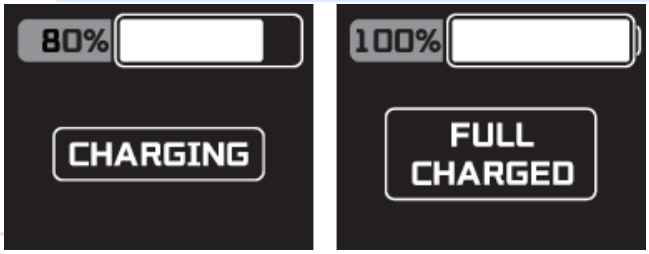


- **"CHARGING"** - Charge en cours
- **"FULL CHARGED"** - Batterie entièrement chargée

En mode hors tension


Activer le frein

Soulever les leviers des deux côtés des moteurs pour activer le frein

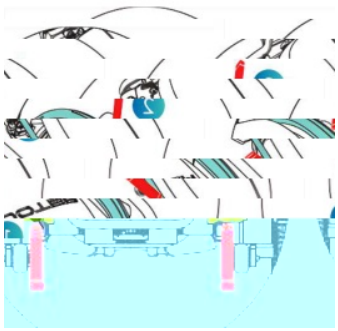

Desserrer le frein

Appuyer vers le bas sur les leviers des deux côtés des moteurs pour desserrer le frein

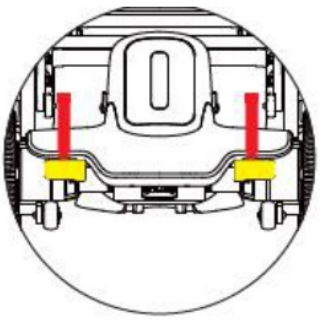

Pour votre sécurité et une utilisation optimale de votre fauteuil roulant électrique

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 10:48 Uhr · sana.swiss